

USO PREVISTO
AESKUCARE® Food Intolerance es un sistema de inmunoensayo enzimático in vitro semicuantitativo para medir simultáneamente anticuerpos IgG₄ de 40 extractos de pruebas (ventanas) cada una. En cada zona de prueba se unen a la membrana un extracto estándar y dos extractos específicos de alimentos o mezclas de alimentos. Los anticuerpos IgG₄ específicos de la muestra se unen a los antígenos correspondientes. El IgG₄ humano se detecta mediante anticuerpos IgG₄ antihumanos específicos. Para amplificar la señal se añade un anticuerpo secundario unido a fosfatasa alcalina. Después de añadir el reactivo de color, el IgG₄ unido se identifica mediante un precipitado de color azul indigo. Los niveles de IgG₄ específicos de los alimentos (slgG₄) se pueden leer de manera semicuantitativa y a simple vista para los 40 extractos de alimentos o mezclas de alimentos. Los niveles de slgG₄ se clasifican en 3 niveles. La lectura se efectúa comparando la saturación (intensidad) de color de las líneas de señales con la del estándar correspondiente en cada zona de prueba.

PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO
AESKUCARE® Food Intolerance es un ensayo ELISA (Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) modificado. El dispositivo contiene 4 filas con 5 zonas de prueba (ventanas) cada una. En cada zona de prueba se unen a la membrana un extracto estándar y dos extractos específicos de alimentos o mezclas de alimentos. Los anticuerpos IgG₄ específicos de la muestra se unen a los antígenos correspondientes. El IgG₄ humano se detecta mediante anticuerpos IgG₄ antihumanos específicos. Para amplificar la señal se añade un anticuerpo secundario unido a fosfatasa alcalina. Después de añadir el reactivo de color, el IgG₄ unido se identifica mediante un precipitado de color azul indigo. Los niveles de IgG₄ específicos de los alimentos (slgG₄) se pueden leer de manera semicuantitativa y a simple vista para los 40 extractos de alimentos o mezclas de alimentos. Los niveles de slgG₄ se clasifican en 3 niveles. La lectura se efectúa comparando la saturación (intensidad) de color de las líneas de señales con la del estándar correspondiente en cada zona de prueba.

Medidas de precaución: 1. Utilizar solamente para diagnósticos humanos in vitro. 2. Lea por completo estas instrucciones de uso antes de realizar la prueba. 3. No utilice los reactivos después de la fecha de caducidad. 4. En caso de que el embalaje presente daños, revise cuidadosamente la bolsa protectora del dispositivo para ver si está deteriorada. Asegúrese de que los reactivos no están dañados ni abiertos. En caso de duda, no use este kit de pruebas para evitar resultados incorrectos o diagnósticos erróneos. 5. No se recomienda acumular reactivos. 6. El reactivo de color contiene 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato y nitroazul de tetrazolol. Evite el contacto con la piel. Use guantes apropiados. Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del material (disponible previa solicitud). 7. Todos los componentes son de un solo uso. 8. Los resultados de las pruebas no serán válidos si no se siguen estas medidas de precaución. 9. La sangre coagulada puede obstruir las vías de paso de los fluidos.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y protegido de la luz a 2-8 °C (36-46 °F). Todos los reactivos vienen listos para usar, en dosis individuales y envasados en tubos de rosca.

CADUCIDAD

La fecha de caducidad está impresa en las etiquetas del embalaje de la prueba. La fecha de caducidad del kit es aplicable para todos los componentes del kit, incluso si la caducidad de cada componente es diferente. Todos los componentes de la prueba deben desecharse después de su caducidad.

REACTIVOS Y MATERIALES

1. DILUT - Diluyente para muestras, 350 µl, 1x (tapón naranja). **2. WASH - Solución de lavado**, 1 ml cada uno, 3x (tapón azul). **3. Ab1G4 - Solución de anticuerpos 1G4**, 800 µl, 1x (tapón gris). **4. Ab2 - Solución de anticuerpos 2**, 800 µl, 1x (tapón amarilla). **5. COLR - Reactivo de color**, 800 µl cada uno (contiene 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato/nitroazul de tetrazolol), 2x (tapón blanca). **6. STOP - Buffer de parada**, 1 ml, 1x (tapón verde). **Nota:** Todos los reactivos están listos para usar. Conservar a 2-8 °C hasta la fecha de caducidad.

Los materiales humanos usados en los componentes del dispositivo AESKUCARE® Food Intolerance han sido analizados y declarados negativos en VIH, hepatitis B y hepatitis C. Sin embargo, por razones de seguridad, todos los componentes del kit deben tratarse como potencialmente infecciosos.

Materiales suministrados: instrucciones de uso, ficha de evaluación, tarjeta promocional, dispositivo de ensayo AESKUCARE® Food Intolerance, bastidor de reactivos con 9 ampollas de color codificadas, estuche para muestras de sangre *

* material con certificación  : hisopo de desinfección, sistema esterilizado de extracción de sangre capilar de 50 µl con heparina de lito, hisopo, lirita

* lanceta: producto estéril con certificado  que sirve como dispositivo de punción para la extracción de sangre

* jeringuilla (líquidos de aplicación)

Otros materiales necesarios no incluidos en el kit: Guantes desechables, temporizador.

Para muestras de sangre venosa completa y/o plasma: suministros comunes de venopunción, tubos de recolección de sangre heparinizados, pipeta de laboratorio

Lista de extractos de alimentos: consultar folleto de evaluación de resultados incluido en la caja.


MUESTRAS PARA LA PRUEBA

Para esta prueba se puede usar sangre capilar de los dedos, lóbulos de las orejas o talones (en caso de lactantes). El sistema de extracción de sangre capilar incluido en el kit debe usarse para recoger el volumen correcto (50 µl). También se puede usar como muestra para esta prueba sangre venosa completa, plasma o suero heparinizados (heparina de sodio o lito). El volumen que se debe añadir al diluyente de muestras debe ser de 50 µl en caso de sangre completa y de 20 µl en caso de plasma o suero. En caso de plasma o suero, deben usarse pipetas de laboratorio para administrar el volumen necesario. Una vez añadidas al diluyente, todas las muestras pueden conservarse a 2-8 °C hasta un máximo de 72 horas. Si desea almacenar la muestra, asegúrese de que coloca en el kit la etiqueta de identificación del paciente. **Nota:** No almacene la sangre en el sistema de extracción de sangre capilar.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

Preparación: Todos los reactivos y el dispositivo de ensayo deben ponerse a temperatura ambiente (18-30 °C) durante al menos 30 minutos antes de su uso. 1. Abra el kit y extraiga el dispositivo, la jeringuilla, el bastidor de reactivos y el estuche para muestras de sangre. Colóquelos sobre una superficie lisa. 2. Abra y monte el bastidor de reactivos. 3. Coloque la etiqueta de identificación del paciente en el espacio de color gris disponible para la etiqueta ubicado en el dispositivo.

Extracción de muestras de sangre capilar: Abra el estuche para muestras de sangre y extraiga sus contenidos: toallita humedecida con alcohol, lanceta de seguridad, sistema de extracción de sangre capilar de 50 µl, gasa y tinta. Coloque todos los artículos en una superficie limpia y lisa. 1. Pellizque la punta del dedo o colóquelo en agua caliente durante unos instantes antes de efectuar la punción para optimizar el flujo de sangre. 2. Limpie la zona de punción con la toallita humedecida con alcohol (idealmente dejó 3 o 4, lateral). 3. Desbloquee la lanceta de seguridad como se muestra en la imagen (Paso A) y quite la tapón de protección. 4. Coloque la lanceta de seguridad en la punta del dedo donde se va a efectuar la punción (Paso B) y apriete el botón con firmeza.

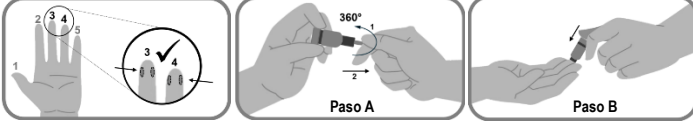

Nota: Asegúrese de que coloca la mano por debajo de la altura del corazón. Si el flujo de sangre es lento al principio, masajee suavemente el dedo y pruebe que la mano está por debajo (!) de la altura del corazón.

Toque las gotas de sangre con la punta del sistema de extracción de sangre capilar. Sujete el sistema de extracción de sangre capilar en sentido horizontal o ligeramente inclinado hacia abajo y deje que la sangre fluya hasta que se rellene correctamente. Asegúrese de que no cubre el orificio (de aire) del émbolo. El tipo de sangre establece el volumen de la muestra (50 µl). Cubra la herida con la tirta. Abra inmediatamente la ampolla de diluyente de la muestra (tapón naranja) y coloque la punta del sistema de extracción de sangre capilar justo encima de la apertura de la ampolla. Cubra con el dedo el orificio del extremo final del émbolo. Presione suavemente el émbolo para añadir la sangre a la ampolla de diluyente de la muestra. Cierre la ampolla de diluyente de la muestra y mezcle suavemente de forma manual o brevemente mediante un agitador tipo vórtex.

Nota: No almacene la sangre sin haberla añadido al diluyente de muestras. Una vez añadidas al diluyente, todas las muestras pueden conservarse a 2-8 °C hasta un máximo de 72 horas. Si se utiliza sangre sin tratar (es decir, sin haber añadido sangre completa al diluyente de muestras), los resultados de la prueba no serán válidos.

Toma de muestras de sangre venosa, plasma o suero: Como muestra para esta prueba también se puede usar sangre venosa completa, plasma o suero heparinizados (heparina de sodio o lito). 1. Utilice las técnicas estándar de laboratorio para la recogida de muestras de sangre venosa (heparinizada). 2. Si lo desea, centrifuge las muestras mediante una técnica estándar de laboratorio para separar el plasma de las células sanguíneas. El volumen que se debe añadir al diluyente de muestras (tapón naranja) debe ser de 50 µl en caso de sangre completa y de 20 µl en caso de plasma o suero. Deben utilizarse pipetas de laboratorio para administrar el volumen necesario. Mézclelo suavemente y de forma manual después de haber añadido la muestra a la ampolla de diluyente de muestras.

Al añadir la muestra: 1. Deben usarse guantes mientras se realiza la prueba. 2. Abra la ampolla de diluyente de muestras (tapón naranja) que contiene la muestra y extraiga la totalidad del contenido con la jeringuilla. Asegúrese de que en el interior no se forman burbujas de aire grandes. Coloque la jeringuilla con firmeza en el puerto para fluidos del dispositivo de ensayo e inyecte la totalidad del contenido de la jeringuilla apretando el émbolo. **Incubéelo durante 8 minutos.** **Nota:** un ligero refujo de la mezcla de muestra de sangre no influye en los resultados de la prueba, siempre que antes se haya empapado toda la tira de membrana con la mezcla de muestra de sangre.

Incubación de anticuerpos primaria: 1. Abra la primera ampolla de solución de lavado (tapón azul), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba. 2. Abra la ampolla de anticuerpos primaria (tapón gris), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba. **Incubéelo durante 8 minutos.**

Incubación de anticuerpos secundaria: 1. Abra la segunda ampolla de solución de lavado (tapón azul), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba. 2. Abra la ampolla de anticuerpos secundaria (tapón amarilla), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba. **Incubéelo durante 8 minutos.**

Reacción de color: 1. Abra la tercera ampolla de solución de lavado (tapón azul), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba. 2. Abra las dos ampollas de reactivo de color (tubos marrones, tapón blanca), extraiga la totalidad de la solución de la primera ampolla e inyéctela como se describe arriba. Inicie el temporizador. **3. Después de 30 segundos:** extraiga la totalidad de la solución de la segunda ampolla e inyéctela como describe arriba. **Incubéelo durante 5 minutos** (tiempo de incubación total de ambos pasos).

Parar la reacción: Abra el buffer de parada (tapón verde), extraiga la totalidad de la solución e inyéctela como se describe arriba.

PROCEDIMIENTO PARA DOS O MÁS PRUEBAS PAREALES

Los usuarios familiarizados con las pruebas AESKUCARE® Food Intolerance pueden realizar más de una prueba de forma paralela. Se recomienda comenzar las pruebas en intervalos de al menos 1 minuto o sus múltiplos para garantizar una manipulación adecuada durante las pruebas de desarrollo. No se recomienda realizar más de cinco pruebas en paralelo.

LECTURA DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO

Para evaluar los resultados, coloque el dispositivo de ensayo con el puerto para fluidos (entrada de muestras) apuntando hacia la izquierda. En esta posición, los números de extractos de alimentos y mezclas de alimentos se colocan encima y debajo de las zonas de prueba correspondientes. Los resultados deben leerse con buena iluminación. Tenga cuidado con las sombras producidas por la etiqueta delantera y evite confusiones con las señales de la prueba. Empezce por la parte superior izquierda y, a continuación, vaya leyendo cada zona de prueba hasta llegar al final, a la derecha de cada fila. Repita el procedimiento fila por fila. Esto se corresponde con la disposición de la lista de alimentos en la ficha de evaluación. Para estimar el nivel (1-3) de una señal, su intensidad debe compararse con la intensidad del estándar de la parte izquierda de la zona de prueba correspondiente. Los resultados se registran en la ficha de evaluación correspondiente.

Nota: 1. Se recomienda comparar los resultados de la prueba con los ejemplos de resultados del ensayo tal y como se muestra en el folleto ilustrado de las Instrucciones de uso. 2. Asegúrese de utilizar solamente la ficha de evaluación que forma parte del kit AESKUCARE® Food Intolerance correspondiente. 3. La lectura de los resultados de la prueba debe realizarse inmediatamente después del procedimiento para evitar confundirse con otras pruebas. Los resultados de la prueba permanecen estables durante al menos 24 horas si se conservan en un lugar oscuro. El color de fondo de las zonas de prueba podría alterarse con el tiempo.En caso de que aparezcan pequeñas burbujas de aire, estas pueden eliminarse introduciendo con cuidado un poco de aire en el dispositivo por medio de la jeringuilla suministrada hasta que las burbujas desaparezcan de las zonas de prueba. Los resultados no son válidos si la banda estándar no está visible.

Posibles resultados de evaluación del ensayo

Nivel 1	Intensidad de la señal menor que el estándar	
Nivel 2	Intensidad de la señal aproximadamente igual que el estándar	
Nivel 3	Intensidad de la señal mayor que el estándar	

Ejemplo de la zona de prueba



Correlación entre los niveles de AESKUCARE® Food Intolerance y el IgG ₄ específico de los alimentos		
Nivel de AESKUCARE® Food Intolerance	Concentración de slgG ₄ *	
1	baja	
2	moderada	
3	alta	

* consulte la sección «Interpretación de los resultados»

Especificidad analítica: AESKUCARE® Food Intolerance detecta anticuerpos IgG₄ específicos. No está previsto que haya reactividad cruzada con otras especies de inmunoglobulina.

Sensibilidad/especificidad diagnóstica: Los resultados de AESKUCARE® Food Intolerance han sido comparados con la prueba de laboratorio slgG₄ ELISA de la AESKU.Group.

Restricciones e interferencias: Ninguna conocida.

CONTROL DE CALIDAD

Es un principio de buenas prácticas de laboratorio registrar los números de lote de todos los componentes utilizados.

CONTROLES INTERNOS

Cada zona de prueba contiene un estándar (banda izquierda). Este estándar aparece en el paso de desarrollo como una banda con una saturación de color indigo intermedio. Si falta el estándar, los resultados no serán válidos para dicha zona de prueba y el test deberá ignorarse o repetirse con un nuevo kit de pruebas.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En diagnósticos de slgG₄ no es común considerar valores particulares como límites estrictamente definidos. El nivel de concentración de slgG₄ es específico del individuo y no se puede clasificar en límites generalizados. El estándar de AESKUCARE® Food Intolerance se corresponde con un nivel de slgG₄ intermedio (nivel 2). La intensidad de las señales igual o superior al estándar (niveles 2 y 3) se corresponde con un nivel de slgG₄ moderado o alto.* Para diagnosticar a un paciente, los resultados de la prueba deben evaluarse junto con el historial médico y los síntomas (anamnesis).

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Deben tomarse precauciones para manipular sangre humana y eliminar de manera segura las piezas utilizadas (que contengan sangre). Consulte todas las directrices locales y nacionales relativas al tratamiento de sustancias biológicas peligrosas. No se considera que el resto del kit constituya un riesgo biológico y se puede eliminar según corresponda.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

1. Un diagnóstico clínico definitivo de intolerancias alimentarias no se debe basar solamente en los resultados de un único método de diagnóstico. Las pruebas in vitro de slgG₄ deben acompañarse siempre del historial médico completo y el análisis de los síntomas. 2. Cada paciente reacciona de una manera, por lo que unos resultados idénticos de las pruebas no implican necesariamente el mismo diagnóstico. Alimentos diferentes con estructuras moleculares o epítopos similares pueden desencadenar reacciones cruzadas leves o severas. Las reacciones cruzadas deben tenerse siempre en cuenta. 3. Los resultados in vitro negativos pueden ocurrir ocasionalmente en pacientes con síntomas de intolerancia alimentaria correlacionados de forma clara con el contacto con los alimentos. 4. Los resultados de nivel 2 o 3 indican la presencia de anticuerpos slgG₄ en la muestra del paciente de uno o más de los cuarenta extractos de alimentos o mezclas de alimentos. No se pueden excluir niveles altos de slgG₄ de otros alimentos distintos de los comprendidos en AESKUCARE® Food Intolerance. 5. Los pacientes cuyos síntomas clínicos sugieran intolerancia alimentaria pero con un resultado de nivel 1 deben remitirse a un especialista para una investigación más detallada. 6. La capacidad de enlace de los anticuerpos slgG₄ puede variar de un alimento a otro. Por tanto, unos resultados idénticos para alimentos diferentes no reflejan necesariamente los mismos niveles de anticuerpos slgG₄. 7. Se obtendrán resultados fiables y reproducibles si el ensayo se realiza de acuerdo con las instrucciones de procedimiento y cumpliendo los principios de buenas prácticas de laboratorio.

VALORES PREVISTOS

Por norma general, cuanto más alto sea el nivel del resultado, más alta será la concentración de IgG₄ específico del alimento. Como ocurre con todos los ensayos de IgG₄ específico, existe una reactividad cruzada potencial entre alimentos relacionados y no relacionados, que puede contener moléculas (antígenos) similares u homólogos. Cuanto más próxima es la relación biológica entre las diferentes especies, mayor es el grado de similitud estructural e inmunológica de los epítopos presentes en los alimentos. Por tanto, un paciente que reaccione clínicamente a una determinada especie probablemente reaccionará a otra estrechamente relacionada debido a la reactividad cruzada inmunológica de los epítopos estructuralmente relacionados. Por otro lado, la reactividad cruzada también puede ocurrir entre especies relacionadas de forma lejana. Algunas familias de proteínas se distribuyen ampliamente y parecen contener estructuras altamente preservadas que pueden servir como epítopos similares.

GARANTÍA

Los datos de los resultados aquí presentados han sido obtenidos siguiendo el procedimiento indicado. Cualquier cambio o modificación en el procedimiento no recomendado aquí podría afectar a los resultados. En tal caso, Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG no se hace responsable de garantía alguna, ya sea expresa, implícita o legal, incluida la garantía implícita de comercialización y adecuación para el uso. En dicho caso, Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG y sus distribuidores autorizados no serán responsables de los daños indirectos o resultantes.

REFERENCIAS

Hardman, G. y Hart, G.: Dietary advice based on food-specific IgG results (Consejos dietéticos basados en resultados de IgG específico de los alimentos), Nutrition & Food Science, 2007; 37(1): 16-23. Müller, U. y Bayer, W.: Zur Relevanz der Bestimmung von spezifischem IgE und spezifischem IgG/IgG₄ in der Aufdeckung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Da la relevancia de analizar el IgE y el IgG/IgG₄ específicos en el esclarecimiento de las intolerancias alimentarias), Erfahrungsheilkunde, 2007; 56: 400-406. David, T. J.: Adverse reactions and intolerance to foods (Reacciones adversas e intolerancias alimentarias), Br Med Bull, 2000; 56: 34-50.

 **DIRECCIÓN:** Fabricado por Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG, Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim, Germany, Tel: +49 6734 - 9622-0, Fax: +49 6734 - 9622-2222, Web: www.aesku.com
Se puede solicitar información adicional sobre la empresa y el producto en cualquier momento.

* A diferencia de la situación para las alergias de tipo 1 (tipo inmediato), actualmente no se dispone de un sistema de evaluación uniforme para clasificar las intolerancias alimentarias mediante concentraciones de slgG₄ o slgG.

HISTORIA: Actualización en la sección «Materiales suministrados» e ilustraciones para la toma de muestras de sangre.

Las instrucciones de uso son válidas para AESKUCARE® Food Intolerance ONE (REF: 830101-LV1)

Mode d'emploi (FR)

UTILISATION PREVUE

AESKUCARE® Food Intolerance est une méthode immunoenzymatique in vitro semi-quantitative destinée à mesurer simultanément les anticorps IgG₄ spécifiques de 40 extraits alimentaires/mélanges alimentaires dans le sang total capillaire, le sang total veineux, le plasma ou le sérum humain hépariné ou traité au Na-EDTA. Cet outil (dispositif de diagnostic près du patient) est prévu pour étayer le diagnostic chez les patients présentant différents symptômes cliniques associés aux intolerances alimentaires. Il doit être utilisé par des professionnels de la santé expérimentés dans l'utilisation des méthodes de diagnostic in vitro.

PRINCIPE DE LA PROCÉDURE

AESKUCARE® Food Intolerance est une version modifiée de la technique ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay - Dosage d'immunoadsorption par enzyme liée). Le dispositif compte 4 rangées divisées chacune en 5 zones de test (fenêtres). Dans chaque zone de test, une référence et deux extraits alimentaires ou mélanges alimentaires spécifiques sont liés à la membrane. Les anticorps IgG₄ spécifiques présents dans l'échantillon se lient aux antigènes correspondants. L'IgG₄ humain lié est détecté grâce aux anticorps IgG₄ spécifiques antihumans. Un anticorps secondaire couplé à la phosphatase alcaline est ajouté pour amplifier le signal. Une fois l'indicateur coloré ajouté, l'IgG₄ lié est identifié grâce à un précipité de couleur indigo. La concentration des IgG₄ spécifiques (IgG₄s) des 40 extraits alimentaires/mélanges alimentaires peut être lue à l'œil nu de manière semi-quantitative. Les concentrations des IgG₄s sont répertoriées sous 3 niveaux. La lecture est réalisée en comparant la saturation (intensité) de la couleur des lignes de signal à celle de la référence correspondante dans chaque zone de test.

Précautions: 1. Pour diagnostic in vitro humain uniquement. 2. Veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité avant d'effectuer le test. 3. Ne pas utiliser les réactifs au-delà de leur date d'expiration. 4. Si l'emballage est endommagé, veuillez vérifier minutieusement que le sac de protection du dispositif. Vérifiez que les réactifs ne sont ni endommagés ni ouverts. En cas d'hésitation, ne pas utiliser le kit de test afin d'éviter d'obtenir des résultats incorrects ou un diagnostic erroné. 5. Il est déconseillé de regrouper les réactifs. 6. L'indicateur coloré contient du 5-bromo-4-chloro-3'-indolylphosphate et du nitro-bluo tétrazoliolum chloride. Évitez tout contact avec la peau. Portez des gants adaptés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité (disponible sur demande). 7. Tous les composants sont à usage unique. 8. Si ces précautions ne sont pas observées, les résultats du test ne seront pas valides. 9. Les voies de fluides peuvent être bloquées par du sang coagulé.

CONSERVATION

À conserver à l'abri de la lumière et au frais, entre 2 et 8°C. Tous les réactifs sont prêts à l'emploi, à dose unique et contenus dans des tubes avec bouchon à vis.

EXPIRATION

la date d'expiration est imprimée sur des étiquettes collées sur la boîte du test. La date d'expiration du kit est valable pour tous ses composants, même si la date d'expiration de l'un d'entre eux est différente ! Tous les composants du test doivent être éliminés une fois la date d'expiration dépassée.

RÉACTIFS ET MATÉRIEL

1. DILUT - Diluant d'échantillon, 350 µl, 1x (bouchon orange) **2. WASH - Solution de lavage**, 1 ml chacune, 3x (bouchon bleu) **3. Ab1G4 - Solution d'anticorps 1G4**, 800 µl, 1x (bouchon gris) **4. Ab2 - Solution d'anticorps 2**, 800 µl, 1x (bouchon jaune) **5. COLR - Indicateur coloré**, 800 µl chacun (contient 5-bromo-4-chloro-3'-indolyl-phosphate/nitro-bluo tétrazoliolum chloride), 2x (bouchon blanc) **6. STOP - Tampon de fin**, 1 ml, 1x (bouchon vert). **Remarque:** tous les réactifs sont prêts à l'emploi ; à conserver entre 2 et 8°C jusqu'à la date d'expiration.

Après analyse, il a été établi que les résultats du matériel biologique utilisé dans les composants du dispositif AESKUCARE® Food Intolerance étaient négatifs pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Cependant, pour des raisons de sécurité, l'ensemble des composants du kit doivent être traités comme s'ils pouvaient être infectieux.

Matériel fourni: mode d'emploi, fiche d'évaluation, carte promo, dispositif d'analyse AESKUCARE® Food Intolerance, support pour réactifs contenant 9 fioles de couleurs différentes, poche de prélèvement sanguin*

* Matérielau réactif : tampon désinfectant, tube de prélèvement capillaire de 50 µl rempli d'héparine de lithium, coton, sparadrap

* Lancette: produit stérile et certifié , utilisé comme autopiqueur pour le prélèvement de sang
* Seringue (application des fluides)

Autre matériel nécessaire mais non inclus dans le kit: gants jetables, minuterie

Pour les échantillons de sang veineux total et/ou de plasma : matériel normal de ponction veineuse, tubs de recueil de sang hépariné, pipette de laboratoire

Liste des extraits alimentaires : voir le dépliant d'évaluation des résultats inclus dans la boîte


ÉCHANTILLONS DU TEST

Le sang capillaire recueilli au site d'une piqûre au doigt, aux lobes d'oreille ou aux talons (pour les nourrissons) peut être utilisé dans ce test. Le tube de prélèvement capillaire inclus dans le kit doit être utilisé pour récolter le volume adéquat (50 µl). Dans le cadre de ce test, du sang veineux total, du plasma ou du sérum hépariné (héparine de sodium ou de lithium) peut également être utilisé comme spécimen. Le volume à ajouter au diluant d'échantillon doit être de 50 µl pour le sang total et de 20 µl pour le plasma ou le sérum. Si du plasma ou du sérum est utilisé, des pipettes de laboratoire doivent être utilisées pour ajouter le volume requis. Une fois ajoutés au diluant, tous les échantillons doivent être conservés entre 2 et 8°C pendant 72 heures maximum. Si vous souhaitez conserver l'échantillon, veuillez vous assurer d'indiquer le numéro d'identification du patient sur l'étiquette du kit de test. **Remarque !** Ne pas conserver le sang dans les tubes de prélèvement capillaire.

PROCÉDURE DU TEST

Préparation: tous les réactifs et le dispositif d'analyse doivent être ajustés à la température ambiante (entre 18 et 30°C) au moins 30 minutes avant l'utilisation. 1. Ouvrez le kit et sortez-en le dispositif, la seringue, le portoir pour réactifs et la poche de prélèvement de sang. Placez-les sur une surface plane. 2. Ouvrez et assemblez le portoir pour réactifs. 3. Indiquez le numéro d'identification du patient sur l'étiquette grise du dispositif.

Prélèvement d'un échantillon de sang capillaire: ouvrez la poche de prélèvement de sang et sortez-en son contenu: coton imbibé d'alcool, lancette de sécurité, tube de prélèvement capillaire de 50 µl, gaz et sparadrap. Placez tous les éléments sur une surface propre et plane. 1. Pour stimuler la circulation sanguine, pincez le bout du doigt ou mettez-le dans l'eau chaude pendant quelques moments avant de procéder à la piqûre. 2. Nettoyez le site de piqûre (idéalement doigt 3 ou 4, sur le côté) à l'aide du coton imbibé d'alcool. 3. Enlevez la sécurité de la lancette tel qu'illustré (Étape A) et retirez le capuchon de protection. 4. Placez la lancette de sécurité sur le côté du doigt à piquer (Étape B) et appuyez fermement sur le bouton.

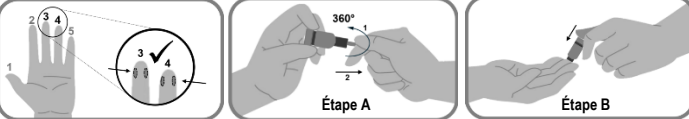

Remarque! Assurez-vous que la main soit placée sous le niveau du cœur. Si dans un premier temps la circulation sanguine est lente, massez délicatement le doigt et vérifiez que la main soit placée sous (!) le niveau du cœur.

Touchez les gouttes de sang à l'aide de l'embout du tube de prélèvement capillaire. Tenez le tube de prélèvement capillaire à l'horizontale ou légèrement inclinée vers le bas afin que le sang y coule jusqu'à le remplir complètement.

Assurez-vous de ne pas couvrir le trou (d'air) du poussoir. L'arrêt de l'écoulement du sang détermine le volume d'échantillon (50 µl). Placez un sparadrap sur la plaie. Ouvrez immédiatement la fiole contenant le diluant d'échantillon (bouchon orange) et placez l'embout du tube de prélèvement capillaire juste au-dessus du goulot. Avec votre doigt, couvrez le trou à la fin du poussoir. Appuyez délicatement sur le poussoir pour ajouter le sang dans la fiole contenant le diluant d'échantillon. Refermez la fiole et secouez légèrement pendant quelques secondes, manuellement ou à l'aide d'un agitateur.

Remarque! Ne pas conserver le sang sans l'avoir ajouté au diluant d'échantillon. Une fois ajoutés au diluant, tous les échantillons doivent être conservés entre 2 et 8°C pendant 72 heures maximum. Si du sang non traité est utilisé (c.-à-d. sans que le sang total n'ait été ajouté au diluant d'échantillon), les résultats du test ne seront pas valides.

Prélèvement d'échantillon de sang veineux, de plasma ou de sérum: dans le cadre de ce test, du sang veineux total, du plasma ou du sérum hépariné (héparine de sodium ou de lithium) peut également être utilisé comme spécimen. 1. Prélèvez les échantillons de sang veineux (hépariné) à l'aide des techniques standard de laboratoire. 2. Si vous le souhaitez, séparez le plasma des cellules sanguines à l'a

DESTINAZIONE D'USO

AESKUCARE® Food Intolerance è un saggio immunoenzimatico semiquantitativo in vitro per la misurazione simultanea di anticorpi IgG₄ specifici rispetto a 40 estratti/mix alimentari in sangue capillare, sangue venoso, plasma o siero umano eparinato o trattato con Na-EDTA. È uno strumento (dispositivo per analisi decentrate) destinato a supportare la diagnosi di pazienti che presentano vari sintomi clinici associati a intolleranze alimentari. Deve essere utilizzato da operatori sanitari professionali esperti in metodi di diagnosi in vitro.

PRINCIPIO DELLA PROCEDURA

AESKUCARE® Food Intolerance è un sistema ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, saggio immuneassor bente legato a un enzima) modificato. Il dispositivo presenta 4 righe con 5 aree di test (finestre) ciascuna. In ogni area di test vengono legati alla membrana un estratto o un mix alimentare standard e due estratti o mix alimentari specifici. Gli anticorpi IgG₄ specifici del campione si legano agli antigeni corrispondenti. L'IgG₄ umano legato viene rilevato da anticorpi IgG₄ anti-umani specifici. Per l'amplificazione del segnale viene accoppiato un anticorpo secondario alla fosfatasi alcalina. Dopo avere aggiunto un reagente colorato, l'IgG₄ legato viene identificato tramite un precipitato color indaco. I livelli degli IgG₄ specifici (slgG₄) possono essere letti in modo semiquantitativo a occhio nudo per tutti i 40 estratti/mix alimentari. Gli slgG₄ vengono classificati in 3 livelli. La lettura viene eseguita confrontando la saturazione (intensità) del colore delle linee di segnale con uno degli standard corrispondenti in ogni campo di test.

Precauzioni: 1. solo per uso diagnostico in vitro umano, 2. Leggere tutto il contenuto delle presenti Istruzioni per l'uso prima di eseguire i test. 3. Non utilizzare i reagenti oltre la loro data di scadenza. 4. In caso di danni alla confezione, controllare attentamente che non vi siano danni all'imballo protettivo del dispositivo. Accertarsi che i reagenti non siano danneggiato o aperti. In caso di dubbi, non utilizzare il kit in modo da evitare risultati non esatti o diagnosi sbagliate. 5. Si sconsiglia di miscelare i reagenti. 6. Il reagente colorato contiene 5-bromo-4-cloro-3'-indolfosfato e nitroblu tetrazolo cloride. Evitare il contatto con la pelle. Indossare guanti adatti. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Scheda di sicurezza (disponibile su richiesta). 7. Tutti i componenti possono essere utilizzati un'unica volta. 8. I risultati del test non sono validi qualora non vengano seguite queste precauzioni. 9. I percorsi dei fluidi possono essere bloccati da coaguli di sangue.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo buio e fresco a 2-8°C. Tutti i reagenti sono pronti per l'uso, vengono forniti in un'unica dose e confezionati in tubetti a vite.

SCADENZA

La data di scadenza è stampata sulle etichette presenti sulla confezione del test. La data di scadenza del kit è valida per tutti i suoi componenti, anche in caso di scadenza diversa su singoli componenti! Dopo la scadenza tutti i componenti del test devono essere smaltiti.

REAGENTI E MATERIALI

1. DILUT - Diluente del campione, 350µl, 1x (coperchio arancione) **2. WASH - Soluzione di lavaggio**, 1ml ognuno, 3x (coperchio blu) **3. Ab1G4 - Soluzione di anticorpi 1G4**, 800µl, 1x (coperchio grigio) **4. Ab2 - Soluzione di anticorpi 2**, 800µl, 1x (coperchio giallo) **5. COLOR - Reagente colorato**, 800µl ognuno (contiene 5-bromo-4-cloro-3'-indolfosfato e nitroblu tetrazolo cloride), 2x (coperchio bianco) **6. STOP - Tampone di arresto**, 1ml, 1x (coperchio verde). **Nota:** tutti i reagenti sono pronti per l'uso; conservare a una temperatura di 2-8°C fino alla scadenza.

Il materiale umano utilizzato nei componenti del dispositivo AESKUCARE® Food Intolerance è stato testato e trovato negativo per HIV, epatite B ed epatite C. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, tutti i componenti del kit devono essere trattati come potenzialmente infettivi.

Materiali forniti: istruzioni per l'uso, scheda di valutazione, scheda promozionale, dispositivo per saggio AESKUCARE® Food Intolerance, rack per reagenti contenente 9 fiale codificate con colori, sacca per prelievo di sangue *

* materiale certificato **CE** : tampone per la disinfezione, dispositivo di sangue capillare di sangue da 50 µl con lito eparina, tampone, cerotto

* lancetta: prodotto sterile, certificato **CE** , che serve come pungidito per il prelievo di sangue

* siringa (applicazione di liquidi)

Ulteriori materiali necessari ma non inclusi nel kit: guanti monouso, timer

Per campioni di sangue venoso e/o plasma: normali materiali per venopuntura, tubi per la raccolta di sangue eparinato, pipetta da laboratorio

Elenco degli estratti alimentari: fare riferimento alla scheda di valutazione dei risultati inclusa nella confezione


CAMPIONI PER IL TEST

Per questo test può essere impiegato sangue capillare prelevato dalle dita oppure dal lobo dell'orecchio o dal tallone (in caso di neonati). Il dispositivo di prelievo capillare di sangue fornito nel kit deve essere utilizzato per raccogliere il giusto volume (50 µl). Quale campione per il test può essere impiegato anche sangue venoso, plasma o siero eparinato (sodio o litio eparina). Il volume da aggiungere al diluente deve essere di 50 µl per sangue intero e 20 µl per plasma o diluente. In caso di plasma o siero, utilizzare le pipette per dispensare il volume necessario. Una volta aggiunti al diluente, tutti i campioni devono essere conservati a una temperatura di 2-8°C per un massimo di 72 ore. Qualora si voglia conservare il campione, apporre un'etichetta sul kit con l'ID del paziente. **Nota!** Non conservare il sangue all'interno dei dispositivi di prelievo capillare di sangue.

PROCEDURA DEL TEST

Preparazione: tutti i reagenti e il dispositivo per il saggio devono rimanere a temperatura ambiente (18-30°C) per almeno 30 minuti prima dell'uso 1. Aprire il kit ed estrarre il dispositivo, la siringa, il rack per reagenti e la sacca per il prelievo di sangue. Posizionarli su una superficie piatta 2. Aprire e assemblare il rack per reagenti 3. Etichettare il dispositivo con l'ID del paziente nella parte grigia dell'etichetta.

Raccolta di campione di sangue capillare: aprire la sacca per il prelievo di sangue ed estrarne il contenuto: tampone imbevuto di alcool, lancetta di protezione, dispositivo di prelievo capillare di sangue da 50 µl, garza e cerotto. Collocare tutti gli articoli su una superficie piatta e pulita. 1. Pizzicare la punta del dito o immergerla in acqua calda per alcuni secondi prima di eseguire la puntura in modo da ottimizzare il flusso sanguigno. 2. Pulire la parte (idealmente dito 3 o 4, laterale) con il tampone imbevuto di alcool. 3. Sblocare la lancetta di protezione come mostrato (punto A) ed eliminare il tappo protettivo. 4. Posizionare la lancetta di protezione sul lato del dito in cui effettuare la puntura (punto B) e premere con fermezza il pulsante.

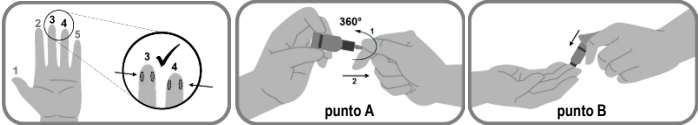

Nota! Fare in modo che la mano sia al di sotto del livello del cuore. Se all'inizio il flusso sanguigno è lento, massaggiare delicatamente il dito e controllare che la mano sia al di sotto (!) del livello del cuore.

Toccare la goccia di sangue con la punta del dispositivo di prelievo capillare di sangue. Mantenere orizzontale tale dispositivo o con una leggera angolazione verso il basso e fare in modo che il sangue lo riempia totalmente. Fare attenzione a non coprire il foro (dell'aria) dello stantuffo. L'arresto del sangue definisce il volume del campione (50 µl). Apporre il cerotto sulla ferita. Aprire immediatamente la fiala del diluente (coperchio arancione) e collocare la punta del dispositivo di prelievo capillare di sangue al di sopra dell'apertura della fiala. Coprire il foro alla fine dello stantuffo con il dito. Premere delicatamente verso il basso lo stantuffo per far scorrere il sangue nella fiala del diluente. Chiudere la fiala del diluente e miscelare delicatamente a mano o con il vortex per un breve periodo di tempo.

Nota! Non conservare il campione senza avelo aggiunto al diluente. Una volta aggiunti al diluente, tutti i campioni devono essere conservati a una temperatura di 2-8°C per un massimo di 72 ore. Se viene utilizzato sangue non trattato (ossia senza aggiungere al diluente), i risultati del test non sono validi.

Raccolta di campioni di sangue venoso, plasma o siero:

quale campione per il test può essere impiegato anche sangue venoso, plasma o siero eparinato (sodio o litio eparina). 1. Utilizzare le tecniche di laboratorio standard per raccogliere campioni di sangue venoso (eparinato). 2. Scomporre utilizzando la tecnica di laboratorio standard per separare il plasma dalle cellule sanguigne, se lo si desidera. Il volume da aggiungere alla fiala del diluente (coperchio arancione) deve essere di 50 µl per sangue intero e 20 µl per plasma o siero. Utilizzare pipette da laboratorio per dispensare il volume necessario. Miscelare delicatamente a mano può avere aggiunto il campione nella fiala del diluente.

Aggiungere il campione: 1. mentre si esegue il test e necessario indossare dei guanti. 2. Aprire la fiala del diluente (coperchio arancione) contenente il campione e aspirarne completamente il contenuto con la siringa. Accertarsi che non si formino grosse bolle di aria all'interno. Collocare la siringa sulla porta del fluido del dispositivo per il saggio e dispensare l'intero contenuto della siringa premendo verso il basso lo stantuffo. **Incubare per 8 minuti.**

Nota: Un lieve riflusso del mix di campioni non influenza i risultati del test se tutta la striscia della membrana è stata inumidita precedentemente con il mix di campioni.

Incubazione di anticorpi primari: 1. Aprire la prima fiala della soluzione per il lavaggio (coperchio blu), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto al punto. 2. Aprire la fiala degli anticorpi primari (coperchio grigio), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto in precedenza. **Incubare per 8 minuti.**

Incubazione di anticorpi secondari: 1. Aprire la seconda fiala della soluzione per il lavaggio (coperchio blu), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto al punto. 2. Aprire la fiala degli anticorpi secondari (coperchio giallo), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto in precedenza. **Incubare per 8 minuti.**

Reazione con colore: 1. Aprire la terza fiala della soluzione per il lavaggio (coperchio blu), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto in precedenza. 2. Aprire le due fiale dei reagenti colorati (tubetti marroni, coperchio bianco), estrarre completamente la soluzione della prima fiala e dispensarla come descritto in precedenza. Avviare il timer. 3. **Entro 30 sec:** estrarre completamente la soluzione della seconda fiala e dispensarla come descritto in precedenza. **Incubare per 5 minuti** (tempo di incubazione totale dei due passaggi).

Arrestare la reazione: Aprire la fiala del tampone di arresto (coperchio verde), estrarre completamente la soluzione e dispensarla come descritto al punto.

PROCEDURA PER DUE O PIU TEST PARALLELI

Gli utenti esperti di test AESKUCARE® Food Intolerance possono eseguire piu di un test in parallelo. Si consiglia di avviare i test con intervalli di almeno 1 minuto o multipli per garantire un'adeguata gestione dei passaggi di sviluppo. Si consiglia di eseguire più di 5 test in parallelo.

LETTURA DEI RISULTATI DEL SAGGIO

Per valutare i risultati, posizionare il dispositivo per il saggio con la porta del fluido (ingresso del campione) rivolta a sinistra. Con tale orientamento i numeri degli estratti/mix alimentari sono collocati al di sopra e al di sotto delle corrispondenti aree di test. I risultati devono essere letti in condizioni di buona illuminazione. Fare attenzione alle ombre causate dall'etichetta anteriore ed evitare confusione con i segnali del test. Iniziare dalla parte superiore sinistra quindi leggere ogni area del test fino all'estremità destra della riga. Ripetere riga per riga. Questo ordine corrisponde al layout dell'elenco degli alimenti nella scheda di valutazione. Per valutare il livello (1-3) di un segnale, è necessario confrontare la sua intensità con quella dello standard sulla parte sinistra dell'area di test corrispondente. I risultati vengono registrati nella corrispondente scheda di valutazione.

Nota! 1. Si consiglia di confrontare i risultati del test con i risultati di esempio del saggio come mostrato nel volantino illustrato Istruzioni per l'uso 2. Utilizzare unicamente la scheda di valutazione che fa parte del corrispondente kit AESKUCARE® Food Intolerance 3. La lettura dei risultati del test deve essere effettuata immediatamente dopo avere effettuato il test per evitare confusione con altri test. I risultati del test rimangono stabili per almeno 24 ore se conservati al buio. Il colore dello sfondo delle aree di test può cambiare con il tempo. Qualora vi siano delle piccole bolle di aria, queste possono essere rimosse immettendo attentamente dell'aria nel dispositivo con l'aiuto della siringa fornita finche le aree di test non presentano più bolle. Se la banda standard non è visibile, i risultati non sono validi.

Possibili risultati della valutazione del saggio

Livello 1	L'intensità del segnale è inferiore allo standard	
Livello 2	L'intensità del segnale è simile allo standard	
Livello 3	L'intensità del segnale è superiore allo standard	

Esempio di aree di test			Correlazione tra i livelli di AESKUCARE® Food Intolerance e gli IgG ₄ specifici alimentari	
			Livello di AESKUCARE® Food Intolerance	Concentrazione di sIgG ₄ *
			1	bassa
			2	moderata
			3	alta
* fare riferimento alla sezione "interpretazione dei risultati"				

Specificita analitica: AESKUCARE® Food Intolerance rileva gli anticorpi IgG₄ specifici. Non è prevista una reattività crociata con altre specie di immunoglobine.

Sensibilità/Specificità diagnostica: I risultati del test di AESKUCARE® Food Intolerance sono stati confrontati con il slgG₄ ELISA test di laboratorio di AESKU.Group.

Restrizioni e interferenze: non si conoscono restrizioni o interferenze.

CONTROLLO QUALITA

E buona prassi di laboratorio registrare il numero del lotto di tutti i componenti utilizzati.

CONTROLLI INTERNI

Ogni area di test contiene uno standard (banda sinistra). Questo viene mostrato nella fase di sviluppo sotto forma di stessa diagnosi. Alimenti differenti con strutture molecolari o epitopi simili possono causare reazioni crociate deboli o intense. E sempre necessario prendere in considerazione le reazioni crociate 3. A volte è possibile ottenere risultati in vitro negativi in pazienti con sintomi di intolleranze alimentari chiaramente correlate al contatto con gli alimenti. 4. Risultati di Livello 2 o 3 indicano la presenza di anticorpi slgG₄ nel campione del paziente per una o più dei 40 estratti/mix alimentari. Elevati livelli di slgG₄ rispetto ad alimenti diversi da quelli utilizzati in AESKUCARE® Food Intolerance non possono essere esclusi 5. Ai pazienti con sintomi clinici che indicano intolleranze alimentari ma con risultati di Livello 1 è necessario consigliare di rivolgersi a uno specialista per ulteriori analisi 6. La capacità di legame degli anticorpi slgG₄ può variare da alimento ad alimento. Pertanto risultati identici per diversi alimenti possono non necessariamente implicare livelli di anticorpi slgG₄ uguali 7. E possibile ottenere risultati affidabili e riproducibili se il saggio viene eseguito in base alle istruzioni procedurali e in conformità alle buone prassi di laboratorio.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Nella diagnostica slgG₄ non è usuale considerare particolari valori quali limiti strettamente definiti. Il livello della concentrazione di slgG₄ e specifico dell'individuo e non può essere classificato in limiti generalizzati. Lo standard in AESKUCARE® Food Intolerance corrisponde a un livello medio di slgG₄ (Livello 2). Le intensità di segnale pari o superiori allo standard (Livello 2 e 3) corrispondono a un livello moderato o alto di slgG₄.* Per effettuare la diagnosi di un paziente, i risultati del test devono sempre essere valutati insieme all'anamnesi clinica e ai sintomi.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

E necessario osservare le precauzioni per la manipolazione di sangue umano e lo smaltimento di parti usate (contenenti sangue). Fare riferimento a tutte le linee guida locali/nazionali inerenti alla manipolazione di sostanze che presentano un rischio biologico. Il resto del kit non fa parte delle sostanze che presentano un rischio biologico, quindi può essere smaltito di conseguenza.

LIMITI DELLA PROCEDURA

1. una definitiva diagnosi clinica di intolleranza aliment re non può basarsi unicamente sui risultati di un unico metodo diagnostico. L'evidenza in vitro di slgG₄ deve sempre essere accompagnata dall'intera anamnesi clinica e analisi dei sintomi 2. Ogni paziente reagisce in maniera diversa, pertanto risultati identici del test non implicano automaticamente la stessa diagnosi. Alimenti differenti con strutture molecolari o epitopi simili possono causare reazioni crociate deboli o intense. E sempre necessario prendere in considerazione le reazioni crociate 3. A volte è possibile ottenere risultati in vitro negativi in pazienti con sintomi di intolleranze alimentari chiaramente correlate al contatto con gli alimenti. 4. Risultati di Livello 2 o 3 indicano la presenza di anticorpi slgG₄ nel campione del paziente per una o più dei 40 estratti/mix alimentari. Elevati livelli di slgG₄ rispetto ad alimenti diversi da quelli utilizzati in AESKUCARE® Food Intolerance non possono essere esclusi 5. Ai pazienti con sintomi clinici che indicano intolleranze alimentari ma con risultati di Livello 1 è necessario consigliare di rivolgersi a uno specialista per ulteriori analisi 6. La capacità di legame degli anticorpi slgG₄ può variare da alimento ad alimento. Pertanto risultati identici per diversi alimenti possono non necessariamente implicare livelli di anticorpi slgG₄ uguali 7. E possibile ottenere risultati affidabili e riproducibili se il saggio viene eseguito in base alle istruzioni procedurali e in conformità alle buone prassi di laboratorio.

VALORI PREVISTI

In generale, più e alto il livello del risultato del test e maggiore è la concentrazione di anticorpi IgG₄ specifici alimentari. Come può avvenire in tutti i test di IgG₄ specifici alimentari, è possibile che avvenga una reattività crociata tra alimenti correlati e non, che possono contenere molecole simili od omologhe (antigeni). Più e stretta la relazione biologica tra diverse specie e maggiore è il grado di similarità strutturale o immunologica degli epitopi presenti nell'alimento.Di conseguenza, un paziente che è clinicamente reattivo a una specie sarà probabilmente reattivo all'altra specie strettamente correlata a causa della reattività crociata immunologica degli epitopi correlati strutturalmente. Per contro, la reattività crociata può avvenire anche tra specie correlate alla lontana a livello biologico. Alcune famiglie di proteine sono ampiamente distribuite e sembrano contenere strutture altamente conservate che possono fungere da epitopi simili.

GARANZIA

I dati sulla performance qui presentati sono stati ottenuti utilizzando la procedura indicata. Eventuali cambiamenti o modifiche alla procedura non consigliati nel presente documento possono alterare i risultati, in tal caso Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG declina qualsiasi garanzia espressa, implicita o legale, inclusa la garanzia implicita della commerciabilità e idoneità all'uso. In tal caso, Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG e i suoi distributori autorizzati non sono responsabili per danni indiretti o consequenziali.

REFERIMENTI

Hardman G and Hart G, "Dietary advice based on food-specific IgG results" Nutrition & Food Science 2007; 37(1): 16-23.Muller U and Bayer W, „Zur Relevanz der Bestimmung von spezifischem IgE und spezifischem IgG/IgG₄ in der Aufdeckung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten" Erfahrungheilkunde 2007; 56: 400-406. David TJ, "Adverse reactions and intolerance to foods" Br Med Bull 2000; 56: 34-50.

 **INDIRIZZO:** prodotto da Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG, Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim, Germany, Tel: +49 6734-9622-0, Fax: +49 6734-9622-2222, Web: www.aesku.com
Ulteriori informazioni sulla società e sul prodotto possono essere richieste in qualsiasi momento.

* Contrariamente alla situazione delle allergie di tipo 1 (tipo immediato), al momento non esiste un sistema di valutazione uniforme per classificare le intolleranze alimentari tramite la concentrazione di slgG₄ o slgG.

STORIA: Aggiornare la sezione "Materiali forniti" e le illustrazioni per il prelievo di sangue.

Le istruzioni per l'uso valgono per AESKUCARE® Food Intolerance ONE (REF: 830101-LV1)



Gebruiksaanwijzing (NL)

BEOOGD GEBRUIK

AESKUCARE® Food Intolerance is een in vitro semi-kwantitatieve, enzymgekoppelde immuniteitstest voor het gelyktijdig meten van voedselspecifieke IgG₄-antilichamen tegen veertig voedselextracten/extractmengsels in gehepariseerd of met Na-EDTA behandeld humaan capillair volbloed, veneus volbloed, plasma of serum. Deze test (hulpmiddel voor patientnabije tests) is ontwikkeld als hulpmiddel bij de diagnose van patienten die diverse klinische symptomen vertonen die in verband worden gebracht met voedselintoleranties. De procedure dient uitgevoerd te worden door professionals in de gezondheidszorg met ervaring in het gebruik van IVD-methoden.

PRINCIPE VAN DE PROCEDURE

AESKUCARE® Food Intolerance is een aangepast ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) systeem. Het testbord omvat vier rijen met elk vijf testvelden (vensters). In elk testveld worden een standaard en twee specifieke voedselextracten of voedselmengsels aan het membraan gebonden. Specifieke IgG₄-antilichamen in het monster binden zich aan de corresponderende antigenen. De gebonden humane IgG₄ wordt gedetecteerd door specifieke anti-humane IgG₄-antilichamen. Een secundair antilichaam dat gekoppeld is aan alkalische fosfatase wordt toegevoegd om het signaal te versterken. Na toevoeging van de kleurreegens wordt gebonden IgG₄ geïdentificeerd door een indigokleurig precipitaat. Concentraties voedselspecifiek IgG₄ (slgG₄) zijn voor alle veertig voedselextracten/voedselmengsels semi-kwantitatief met het blote oog af te lezen. De concentraties slgG₄ worden ingedeeld in drie niveaus. Het aflezen gebeurt door de kleurverzadiging (intensiteit) van de signaalstreepjes te vergelijken met de kleur van de corresponderende standaard in elk testveld.

Voorzorgsmaatregelen: 1. Uitsluitend voor humane in vitro diagnostiek.2. Lees voordat u de test uitvoert deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. 3. Gebruik geen reagentia waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken. 4. Controleer in geval van een beschadigde verpakking de beschermzak van het testbord zorgvuldig op schade. Zorg dat de reagentia niet beschadigd of geopend zijn. Bij twijfel de testset niet gebruiken om juiste resultaten of verkeerde diagnose te voorkomen. 5. Het wordt niet aangeraden reagentia te combineren. 6. De kleurreegens bevat 5-bromo-4-chloro-3'-indolyfosfaat en nitro-blu tetrazoliumchloride. Vermijd aanraking met de huid. Draag geschikte handschoenen. Zie voor meer informatie het Veiligheidsblad (verknijgbaar op aanvraag). 7. Alle componenten zijn voor eenmalig gebruik. 8. Testresultaten zijn niet geldig indien deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd. 9. Vloeistofpaden kunnen worden geblokkeerd door gecoaguleerd bloed.

BEWAREN

Koel en donker bewaren bij 2-8°C. Alle reagentia zijn klaar voor gebruik en als enkele dosering verpakt in buisjes met schroefstop.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

De uiterste gebruiksdatum staat aangegeven op etiketten op de doos. De uiterste gebruiksdatum van de set geldt voor alle componenten van de set, ook wanneer van de afzonderlijke componenten de uiterste gebruiksdata verschillen. Na de uiterste gebruiksdatum dienen alle testcomponenten weggegoorpen te worden.

REAGENTIA EN MATERIALEN

1. DILUT - monsterdiluter, 350µl, 1x (oranje dopje) **2. WASH - spoeloplossing**, 1ml per stuk, 3x (blauwe dopje) 3. **Ab1G4 - antilichaamoplossing 1G4**, 800µl, 1x (grize dopje) **4. Ab2 - antilichaamoplossing 2**, 800µl, 1x (gele dopje) **5. COLOR - kleurreegens**, 800µl per stuk (bevat 5-bromo-4-chloro-3'-indolyfosfaat/nitro-blu tetrazoliumchloride), 2x (witte dopje) **6. STOP - stopbuffer**, 1ml, 1x (groene dopje). Opmerking: Alle reagentia zijn klaar voor gebruik en dienen tot de uiterste gebruiksdatum bewaard te worden bij 2-8°C.

Humaan materiaal dat wordt gebruikt in de componenten van de AESKUCARE® Food Intolerance-testset is negatief getest voor HIV, hepatitis B en hepatitis C. Om veiligheidsredenen dienen echter alle componenten van de set behandeld te worden als potentieel infectueus.

Bijgeleverde materialen: gebruiksaanwijzing, evaluatieblad, promokaart, AESKUCARE® Food Intolerance testbord, reagentiahouder met negen kleurgecodeerde flacons, zakje voor bloedafname

* **CE** gecertificeerd materiaal: desinfectiedoekje, 50 µl capillair met lithiumheparine, gaasje, pleister

* lancet: steriel, **CE** gecertificeerd product dat dient als prikapparaat voor bloedafname

* injectiespuit (toepassing van vloeistoffen)

Extra benodigde materialen niet opgenomen in de set: wegwerphandschoenen, timer.

Voor monsters van veneus volbloed en/of plasma: normale venapunctiebenodigdheden, gehepariniseerde bloedafnamebuisjes, laboratoriumpipet.

Lijst voedselextracten: zie resultatenevaluatieblad in de doos


TESTMONSTERS

Voor deze test kan capillair bloed worden gebruikt dat is afgenomen uit vingertop, oorlel of babyhietje. Gebruik de in de set bijgeleverde capillair om de juiste hoeveelheid bloed af te nemen (50 µl). Ook gehepariseerd (natrium- of lithiumheparine) veneus volbloed, plasma, of serum kan in deze test worden gebruikt als monster. De hoeveelheid die aan de monsterdiluter moet worden toegevoegd is 50 µl voor volbloed en 20 µl voor plasma of serum. Gebruik voor plasma of serum laboratoriumpipetten om de benodigde hoeveelheid monster te vullen. Nadat de monsters aan de monsterdiluter zijn toegevoegd kunnen ze maximaal 72 uur worden bewaard bij een temperatuur van 2-8°C. Wilt u het monster bewaren, zorg dan dat u de testset voorziet van een etiket met de patient ID. **Let op!** Het bloed niet in de capillairen bewaren.

TESTPROCEDURE

Voorbereiding Alle reagentia en het testbord moeten voor gebruik gedurende minimaal 30 minuten op kamertemperatuur worden gebracht (18-30°C). 1. Open de set en neem het bord, de injectiespuit, de reagentiahouder en het zakje voor bloedafname uit de doos. Leg ze op een vlak oppervlak 2. Open de reagentiahouder en bouw hem op. 3. Voorzie het grize etiketveld op het bord van de patient ID.

Capillaire bloedafname: Open het zakje voor bloedafname en neem de inhoud eruit: alcoholdoekje, veiligheidslancet, 50 µl capillair voor bloedafname, gaasje en pleister. Plaats alle voorwerpen op een schoon, vlak oppervlak. 1. Knijp in het vingertopje of houd hem even in warm water om de bloedstroom te optimaliseren voordat u de vinger aanpikt. 2. Maak de aan te prikken plaats schoon (ideaaliter vinger 3 of 4, lateraal) met het alcoholdoekje. 3. Ontgrendel het veiligheidslancet zoals afgebeeld (stap A) en verwijder het beschermkapje. 4. Plaats het veiligheidslancet op de aan te prikken plaats op de vinger (stap B) en druk de knop stevig in.

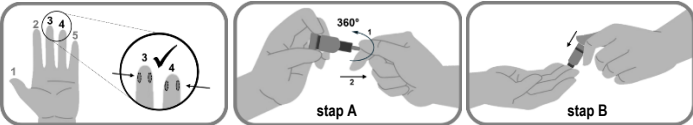

Let op! Zorg dat de hand zich lager bevindt dan het hart. Is de bloedstroom aanvankelijk traag, masseer dan voorzichtig de vinger en controleer of de hand zich lager (!) bevindt dan het hart.

Raak de druppels bloed aan met het puntje van het capillair. Houd het capillair horizontaal of in een licht neerwaarts hoek en laat het bloed stromen tot de juiste hoeveelheid is afgenomen. Zorg dat u niet (lucht)gaatje in de zuiger niet afdekt. De bloedstop bepaalt het volume van het monster (50 µl). Dek het wondje af met een pleister. Open onmiddellijk het huisje van de monsterdiluter (oranje dopje) en plaats het puntje van het capillair net boven de opening van het huisje.

Sluit het gaatje aan het uiteinde van de zuiger af met uw vinger. Druk de zuiger voorzichtig omlaag om het bloed in de flacon van de monsterdiluter te spuiten. Sluit de flacon van de monsterdiluter en meng hem voorzichtig handmatig of met de vortex.

Let op! Het bloed niet opbergen zonder dat u het heeft toegevoegd aan de monsterdiluter. Alle monsters die zijn toegevoegd aan de monsterdiluter kunnen gedurende 72 uur worden bewaard bij een temperatuur van 2-8°C. Bij gebruik van onbehandeld bloed (d.w.z. zonder volbloed toe te voegen aan de monsterdiluter) zijn de testresultaten niet geldig.

Verzamelen van monster veneus bloed, plasma of serum: Ook gehepariniseerd (natrium- of lithiumheparine) veneus volbloed, plasma, of serum kan in deze test worden gebruikt als monster. 1. Pas standaard laboratoriumtechnieken toe voor het verzamelen van veneus (gehepariniseerd) bloed. 2. Draai het monster volgens standaard laboratoriumtechniek om indien gewenst het plasma te scheiden van de bloedcellen. Voeg 50 µl volbloed of 20 µl plasma of serum toe aan de flacon (oranje dopje) van de monsterdiluter. Gebruik laboratoriumpipetten om de benodigde hoeveelheid in te spuiten. Na toevoeging van het monster aan de flacon van de monsterdiluter voorzichtig handmatig mixen.

Het monster toevoegen: 1. Tijdens het uitvoeren van de test handschoenen dragen. 2. De flacon van de monster

PRZEZNACZENIE

AESKUCARE® Food Intolerance to półośrościowy test immunoenzymatyczny in vitro przeznaczony do jednoczesnego pomiaru przeciwciał IgG₄ skierowanych przeciwko 40 wyciągom z pokarmów/mieszaninom wyciągów w heparynizowanej lub pobranej na Na-EDTA ludzkiej pełnej krwi włóścniczkowej, pełnej krwi żyłnej, osoczu lub surowicy. Stanowi on narzędzie (wyrób do badań przykładowych) ułatwiające diagnostykę u pacjentów z różnymi objawami klinicznymi związanymi z nietolerancją pokarmową. Test ten powinien być wykonywany przez pracowników służby zdrowia posiadających doświadczenie w zakresie diagnostyki in vitro.

ZASADA PROCEDURY

AESKUCARE® Food Intolerance to zmodyfikowany system ELISA (ang. Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Urządzenie ma 4 rzędy po 5 obszarów testowych (okienek) każdy. W każdym obszarze testowym jeden wzorec i dwa swoiste wyciągi z pokarmów lub mieszaniny pokarmów związane są z membraną. Swoiste przeciwciała IgG₄ z próbki wiążą się z odpowiednimi antygenami. Związane ludzkie IgG₄ wykrywane jest za pomocą swoistych antyłączdych przeciwciał IgG₄. W celu wzmocnienia sygnału drugie przeciwciała sprzężone jest z fosfatazą alkaliczną. Po dodaniu odczynnika barwiącego związane IgG₄ jest identyfikowane na podstawie osadu w kolorze indygo. Stężenia IgG₄ swoistych względem pokarmu (slgG₄) można odczytać półośrościowo gołym okiem dla wszystkich 40 wyciągów z pokarmów/ mieszanin pokarmów. Stężenia slgG₄ klasyfikowane są do trzech poziomów. Odczyt odbywa się poprzez porównanie nasycenia (intensywności) koloru linii sygnału z nasyceniem koloru wzorca w każdym polu testowym.

Środki ostrożności: 1. Wyłącznie do diagnostyki in vitro wśród ludzi. 2. Przed przystąpieniem do badania należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 3. Nie używać odczynników po upływie dat ważności. 4. W przypadku uszkodzenia opakowania należy sprawdzić torebkę zabezpieczającą urządzenie pod kątem uszkodzeń. W razie wątpliwości nie używać zestawu testowego, aby uniknąć uzyskania nieprawidłowych wyników lub błędnej diagnozy. 5. Nie zaleca się łączenia odczynników. 6. Odczynnik barwiący zawiera 5-bromo-4-chloro-3'-indolilo-fosforan i chlorek błękitu nitrotetrazolowego). Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednie rękawiczki. Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki (dostępnej na żądanie). 7. Wszystkie elementy są przeznaczone do jednorazowego użytku. 8. W razie zignorowania tych środków ostrożności wyniki testu są niewiarygodne. 9. Krew koagulowana może zatkać kanałiki na ciecz.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze 2-8°C/36-46°F. Wszystkie odczynniki są gotowe do użycia i dostarczane są w jednodawkowych zakrępanych probówkach.

DATA WAŻNOŚCI

Data ważności jest nadrukowana na etykietach umieszczonych na opakowaniu zestawu testowego. Data ważności zestawu dotyczy wszystkich jego elementów, nawet jeśli data ważności pojedynczych elementów jest inna! Po upływie daty ważności wszystkie elementy zestawu należy wyrzucić.

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY

1. DILUT - rozcieńczalnik próbeki, 350 µl, 1x (pomarańczowa nakrętka) **2. WASH - roztwór płuczacy**, po 1 ml, 3x (niebieska nakrętka) **3. Ab1G4 - roztwór przeciwciała 1G4**, 800 µl, 1x (szara nakrętka) **4. Ab2 - roztwór przeciwciała 2**, 800 µl, 1x (żółta nakrętka) **5. COLR - odczynnik barwiący**, po 800 µl (zawiera 5-bromo-4-chloro-3'-indolilo-fosforan/chlorek błękitu nitrotetrazolowego), 2x (biała nakrętka) **6. STOP - bufor zatrzymujący**, 1 ml, 1x (zielona nakrętka). **Uwaga:** Wszystkie odczynniki są gotowe do użycia; przechowywać w temperaturze 2-8°C do daty ważności.

Materiał pochodzenia ludzkiego wykorzystany w elementach urządzenia AESKUCARE® Food Intolerance poddano badaniom i wykazano, że jest on ujemny pod względem zawartości wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B i C. Jednakże ze względów bezpieczeństwa wszystkie elementy zestawu należy traktować jako potencjalnie zakażne.

Materiały dostarczane: Instrukcja obsługi, arkusz oceny, karta promocyjna, tester AESKUCARE® Food Intolerance, statyw odczynnikowy zawierający 9 kolorowych fiolek, torebka do pobierania krwi*
* materiał z certyfikatem **CE** - gazik dezynfekujący; kapilara do pobierania krwi 50 µl z heparyną litową, wacik, plaster * lancet; sterylny produkt z certyfikatem **CE** służący jako nakłuwacz do pobierania krwi
* strzykawka (zastosowanie płynów)

Wymagane materiały dodatkowe (niedołączone do zestawu): Jednorazowe rękawiczki, stoper

W przypadku próbek pełnej krwi żyłnej i/lub próbek osocza: zwykłe materiały do pobrania krwi, heparynizowane probówki do pobierania krwi, pipeta laboratoryjna

Lista wyciągów z pokarmów: Patrz ulotka do oceny wyników dołączona do opakowania


PROBKI TESTOWE

Do badania można użyć krwi włóścniczkowej pobranej z palca, płatką ucha lub piętą (w przypadku niemowląt). Dołączonej do zestawu kapilary do pobierania próbki krwi należy użyć do pobrania właściwej objętości próbki (50 µl). Jako próbkę do tego badania można także wykorzystać heparynizowaną (heparyna sodowa lub litowa) próbkę pełnej krwi żyłnej, osocza lub surowicy. Objętość dodawana do rozcieńczalnika powinna wynosić 50 µl w przypadku pełnej krwi i 20 µl w przypadku osocza lub surowicy. W przypadku osocza lub surowicy wymaganej objętość należy odmierzyć za pomocą pipety laboratoryjnej. Po dodaniu do rozcieńczalnika wszystkie próbki można przechowywać w temperaturze 2-8°C do 72 godzin. Chcąc przechowywać próbki, należy pamiętać o oznaczeniu zestawu testowego za pomocą ID pacjenta. **Uwaga!** Krwi nie wolno przechowywać w kapilarach.

PROCEDURA TESTOWA

Przygotowanie: Wszystkie odczynniki i tester należy doprowadzić do temperatury pokojowej (18-30°C) przez co najmniej 30 minut przed użyciem. 1. Otworzyć zestaw i wyjąć urządzenie, strzykawkę, statyw odczynnikowy i torebkę do pobierania próbki krwi. Umieścić je na płaskiej powierzchni. 2. Otworzyć i zmontować statyw odczynnikowy. 3. Oznaczyć urządzenie za pomocą ID pacjenta w obszarze szarej etykiety.

Pobieranie próbki krwi włóścniczkowej: Otworzyć torebkę do pobierania krwi i wyjąć jej zawartość: gazik nasączony alkoholem, bezpieczny lancet, kapilarę do pobierania krwi 50 µl, gazik i plaster. Wszystkie elementy umieścić na czystej, płaskiej powierzchni. 1. Aby pobudzić krążenie krwi, przed wykonaniem nakłucia należy ścisnąć opuszc palca lub umieścić ją na chwilę w ciepłej wodzie. 2. Oczyszczyć miejsce nakłucia (najlepiej palec 3 lub 4, boczny) gazikiem nasączonym w alkoholu. 3. Odblokować bezpieczny lancet, jak pokazano na rysunku (etap A), i zdjąć zatyczkę ochronną. 4. Umieścić bezpieczny lancet po stronie palca, gdzie ma zostać wykonane nakłucie (rys., etap B) i mocno nacisnąć palec.

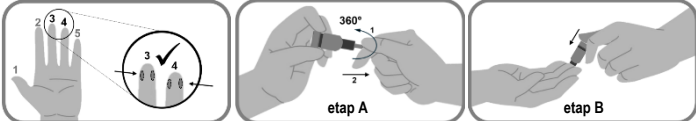

Uwaga! Upewnić się, że dłoń znajduje się poniżej poziomu serca. Jeśli przepływ krwi jest początkowo wolny, delikatnie pomasować palec i sprawdzić, czy dłoń znajduje się poniżej (!) poziomu serca.

Dotknąć kropki krwi końcówką kapilary. Przytrzymać kapilarę poziomo lub pod niewielkim kątem skierowanym do dołu i pozwolić przepływać krwi do momentu jej napalenia. Pamiętać, aby nie przykrywać otworu (powietrze) w tłoku. Ograniczona ustala objętość próbki krwi (50 µl). Przykręcić ranę plasterm. Natychmiast otworzyć fiolet z rozcieńczalnikiem (pomarańczowa nakrętka) i umieścić końcówkę kapilary tuż ponad otworem fiolek. Aby na końcu tłoka zasłonić palcem. Delikatnie wcisnąć tłok, aby wprowadzić krew do fiołki z rozcieńczalnikiem. Zamknąć fiołkę z rozcieńczalnikiem i delikatnie wymieszać ręcznie lub krótko wzręskować.

Uwaga! Nie przechowywać krwi przed dodaniem jej do rozcieńczalnika próbki. Po dodaniu do rozcieńczalnika wszystkie próbki można przechowywać w temperaturze 2-8°C do 72 godzin. W przypadku wykorzystania nieprzygotowanej krwi (tj. bez dodania pełnej krwi do rozcieńczalnika) wyniki badania będą niewiarygodne.

Pobieranie próbki krwi żyłnej, osocza lub surowicy: Jako próbkę do tego badania można także wykorzystać heparynizowaną (heparyna sodowa lub litowa) próbkę pełnej krwi żyłnej, osocza lub surowicy. 1. Do pobrania próbki krwi żyłnej (heparynizowanej) należy zastosować standardowe techniki laboratoryjne. 2. W razie potrzeby odwirować z wykorzystaniem standardowej techniki laboratoryjnej w celu oddzielenia osocza od komórek krwi. Objętość, jaką należy dodać do fiołki z rozcieńczalnikiem (pomarańczowa nakrętka) wynosi 50 µl w przypadku pełnej krwi i 20 µl w przypadku osocza lub surowicy. Do pobrania wymaganej objętości należy użyć pipet laboratoryjnych. Delikatnie wymieszać ręcznie po dodaniu próbki do rozcieńczalnikiem.

Dodawanie próbeki: 1. W trakcie wykonywania testu należy nosić rękawiczki. 2. Otworzyć fiołkę z rozcieńczalnikiem (pomarańczowa nakrętka) zawierającą krew i w całości pobrać jej zawartość do strzykawki. Upewnić się, że wentrzną nie ma dużych pęcherzyków powietrza. Odpowiednio zamocować strzykawkę na porcie płynów testera i wstrzyknąć całą zawartość strzykawki, naciskając tłok. **Inkubować przez 8 minut.** **Wskazówki:** Nieznaczne cofnięcie się mieszaniki nie ma wpływu na wyniki testu, o ile wcześniej cały pasek membrany został pokryty mieszaną.

Inkubacja z pierwszym przeciwciałem: 1. Otworzyć pierwszą fiołkę z buforem płuczającym (niebieska nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. 2. Otworzyć fiołkę z pierwszym przeciwciałem (szara nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. **Inkubować przez 8 minut.**
Inkubacja z drugim przeciwciałem: 1. Otworzyć drugą fiołkę z buforem płuczającym (niebieska nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. 2. Otworzyć fiołkę z drugim przeciwciałem (żółta nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. **Inkubować przez 8 minut.**
Reakcja barwna: 1. Otworzyć trzecią fiołkę z buforem płuczającym (niebieska nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. 2. Otworzyć dwie fiołki z odczynnikami barwnym (brązowe probówki, białe nakrętki), w całości pobrać roztwór z pierwszej fiołki i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. Uruchoμίć stoper. **W ciągu 30 sekund:** W całości pobrać roztwór z drugiej fiołki i wstrzyknąć, jak opisano powyżej. **Inkubować przez 5 minut** (łączny czas inkubacji dla dwóch etapów).

Zatrzymywanie reakcji: Otworzyć fiołkę z buforem zatrzymującym (zielona nakrętka), pobrać roztwór w całości i wstrzyknąć go, jak opisano powyżej.

PROCEDURA TESTOWA W PRZYPADKU CO NAJMNIEJ DWÓCH TESTÓW RÓWNOLEGŁYCH: Doświadczeni użytkownicy testu AESKUCARE® Food Intolerance mogą wykonywać równoległe więcej niż jeden test. Zaleca się rozpoczęcie testów w odstępach wynoszących co najmniej 1 minutę, aby umożliwić odpowiednią obsługę na etapach wywoływania. Nie zaleca się wykonywania więcej niż pięciu testów jednocześnie.

ODCZYTYWANIE WYNIKÓW TESTU

Aby ocenić wyniki testu, należy ustawić tester, kierując port płynów (wlot próbki) w lewą stronę. W tej orientacji numery wyciągów z pokarmów/mieszanin pokarmów są ustawione nad i pod obszarami testowymi. Wyniki należy odczytywać w warunkach dobrego oświetlenia. Należy zwrócić uwagę na zacielenia spowodowane przez przednią etykietę, aby uniknąć pomylenia z sygnałami testowymi. Rozpocząć u góry od lewej strony, a następnie odczytać wszystkie obszary testowe do prawego końca rzędu. Odczytywać kolejne rzędy. Odpowiada to układowi listy pokarmów w arkuszu oceny. Aby oszacować poziom (1-3) sygnału, jego natężenie należy porównać z natężeniem wzorca znajdującego się po lewej stronie danego obszaru testowego. Wyniki należy rejestrować na arkuszu oceny.

Uwaga! 1. Zaleca się porównanie wyników testu z przykładowymi wynikami przedstawionymi na ilustracjach w ulocie. 2. Zwrócić uwagę, aby używać wyłącznie arkusza oceny dołączonego do danego zestawu AESKUCARE® Food Intolerance. 3. Wynik testu należy odczytywać bezpośrednio po zakończeniu procedury testowej, aby uniknąć pomylenia z innymi testami. Wyniki testu są stabilne przez co najmniej 24 godziny pod warunkiem przechowywania w ciemności. Z upływem czasu kolor iła obszarów testowych może ulec zmianie. W przypadku obecności małych pęcherzyków powietrza można je usunąć, ostrożnie napielając urządzenie niewielką ilością powietrza za pomocą dołączonej strzykawki do momentu usunięcia pęcherzyków z obszarów testowych. Jeśli pasmo standardowe jest niewidoczne, wyniki testu są nieprawidłowe.

Możliwe wyniki oceny testu

Poziom 1	Natężenie sygnału niższe niż wzorca	
Poziom 2	Natężenie sygnału mniej więcej takie samo jak wzorca	
Poziom 3	Natężenie sygnału wyższe niż wzorca	

Przykład obszaru testowego		Korelacja między poziomami testu AESKUCARE® Food Intolerance i swoistymi dla pokarmów IgG ₄	
Wzorec		Poziom AESKUCARE® Food Intolerance	Stężenie sIgG ₄ *
		1	niskie
		2	umiarkowane
		3	wysokie
* patrz punkt „interpretacja wyników”			

Swoistość analityczna: Test AESKUCARE® Food Intolerance wykrywa swoiste przeciwciała IgG₄. Nie przewiduje się wystąpienia reaktywności krzyżowej z innymi klasami immunoglobulin.

Czułość/swoistość diagnostyczna: Wyniki testów AESKUCARE® Food Intolerance porównywano z testem laboratoryjnym slgG₄ ELISA AESKU.Group. **Ograniczenia i zakłócenia:** Nieznane.

KONTROLA JAKOŚCI

Dobrá praktyką laboratoryjną jest rejestrowanie numerów partii wszystkich użytych elementów.

KONTROLE WEWNĘTRZNE

Każdy obszar testowy zawiera wzorec (lewe pasmo). Pasma to pojawia się na etapie wywoływania jako pasmo w kolorze indygo o średnim nasyceniu. W przypadku braku wzorca wyniki testu dla tego obszaru testowego są nieprawidłowe. Należy je zignorować lub powtórzyć test z wykorzystaniem nowego zestawu testowego.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

W diagnostyce slgG₄ nie ma żadnych określonych wartości jako ściśle zdefiniowanych zakresów. Stężenie slgG₄ jest specyficzne dla danej osoby i nie może być klasyfikowane w ogólnych zakresach. Wzorec AESKUCARE® Food Intolerance odpowiada średniemu stężeniu slgG₄ (poziom 2). Natężenie sygnału równe lub wyższe od obserwowanego w przypadku wzorca (poziom 2 i 3) odpowiada umiarkowanemu lub wysokiemu stężeniu slgG₄. * W celu zdiagnozowania pacjenta wyniki testu muszą być zawsze oceniane razem z historią choroby i objawami (wywiad chorobowy).

UTYLIZACJA ODPADÓW

Należy postępować zgodnie ze środkami ostrożności dotyczącymi pracy z ludzką krwią i bezpiecznej utylizacji odpadów (zawierających krew). Należy zapoznać się z lokalnymi/krajowymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z odpadami stanowiącymi zagrożenie biologiczne. Pozostała część zestawu nie musi być traktowana jako zagrożenie biologiczne i może zostać odpowiednio zutylizowana.

OGRANICZENIA PROCEDURY

1. Ostateczna kliniczna diagnoza nietolerancji pokarmowej nie powinna być oparta wyłącznie na wynikach pojedynczej metody diagnostycznej. Dowody in vitro na obecność slgG₄ powinny być zawsze uzupełnione pełną historią choroby i analizą objawów. 2. Każdy pacjent reaguje w indywidualny sposób, w związku z tym identyczne wyniki testu nie oznaczają automatycznie takiej samej diagnozy. Różne pokarmy o podobnej strukturze cząsteczkowej lub epitopach mogą wyzwać słabe lub silne reakcje krzyżowe. Należy zawsze pamiętać o możliwości wystąpienia reakcji krzyżowej. 3. Ujemne wyniki badań in vitro mogą czasem występować u pacjentów z objawami nietolerancji pokarmowej, które w sposób wyraźny skorelowane są z kontaktem z żywnością. 4. Wyniki na poziomie 2 lub 3 wskazują obecność przeciwciał slgG₄ w próbce pobranej od pacjenta w przypadku co najmniej jednego z czterdziestu wyciągów z pokarmów/mieszanin pokarmów. Nie można wykluczyć wysokich stężeń slgG₄ przeciwko pokarmom innym niż uwzględnione w AESKUCARE® Food Intolerance. 5. Pacjentów z klinicznymi objawami sugerującymi nietolerancję pokarmową i wynikiem na poziomie 1 należy skierować do specjalisty celem przeprowadzenia dalszych badań. 6. Zdolność różnych pokarmów do wiązania przeciwciał slgG₄ jest różna. W związku z tym identyczne wyniki dla różnych pokarmów nie muszą oznaczać dokładnie równego poziomu przeciwciał slgG₄. 7. Wiarygodne i powtarzalne wyniki można uzyskać, kiedy test jest przeprowadzany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi procedury i dobrą praktyką laboratoryjną.

WARTOŚCI OCZEKIWANE


Zasadniczo im wyższy poziom wyników testu, tym wyższe stężenie IgG₄ swoistego dla pokarmu. Podobnie jak w przypadku innych testów w kierunku IgG₄ swoistych dla pokarmów, istnieje możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej między pokrewnymi i niepokrewnymi pokarmami, które mogą zawierać podobne lub takie same cząsteczki (antygeny). Im bliższy biologiczny związek między różnymi gatunkami, tym większy stopień strukturalnego i immunologicznego podobieństwa epitopów obecnych w pokarmie. Analogicznie pacjent, który reaguje klinicznie na jeden gatunek, zareaguje prawdopodobnie na inny, blisko spokrewniony gatunek w wyniku immunologicznej reaktywności krzyżowej lub strukturalnie pokrewnych epitopów. Z drugiej zaś strony reaktywność krzyżowa może także wystąpić między biologicznie odległymi spokrewnionymi gatunkami. Niektóre rodziny białek są powszechne i wydaje się, że zawierają wysoce ustalone struktury, które mogą służyć jako podobne epitopy.

GWARANCJA

Podane w tym dokumencie dane dotyczące skuteczności uzyskano z wykorzystaniem opisanej tutaj procedury. Wszelkie niezalecane tutaj zmiany lub modyfikacje procedury mogą wpływać na uzyskiwane wyniki. W takiej sytuacji firma Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wyrażonej, doręczanej lub wynikającej z ustaw, w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu. W takiej sytuacji firma Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG i jej autorzyowani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe.

BIBLIOGRAFIA

Hardman G and Hart G, „Dietary advice based on food-specific IgG results” Nutrition & Food Science 2007; 37(1): 16-23. Müller U and Bayer W, „Zur Relevanz der Bestimmung von spezifischem IgE und spezifischem IgG/IgG₄ in der Aufdeckung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten” Erfahrungsheilkunde 2007; 56: 400-406. David TJ, „Adverse reactions and intolerance to foods” Br Med Bull 2000; 56: 34-50.

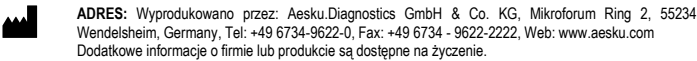

* W odróżnieniu od sytuacji, jaka występuje w przypadku alergii typu 1 (typu natychmiastowego), obecnie nie ma jednolitego systemu oceny dla klasyfikacji nietolerancji pokarmowych za pomocą stężenia slgG₄ lub slgG

HISTORIA: Aktualizacja w sekcji „Materiały dostarczane” i ilustracje dotyczące pobierania krwi.

Instrukcja użycia obowiązuje dla AESKUCARE® Food Intolerance ONE (REF: 830101-LV1)



URČENÉ POŮZITĚ

AESKUCARE® Food Intolerance je semikvantitativna enzymová imunoanalýza in vitro na súběžné meranie protilátok IgG₄ špecifických pre potraviny na 40 extraktov potravín/zmesí extraktov u heparinizovanej alebo Na-EDTA upravenej plnkej plnej kapilárej krvi, žilovej plnej krvi, plazme alebo sére. Je určená na použitie ako nástroj (pomôcka) na delokalizovanú diagnostiku) na podporu diagnostiky pacientov, u ktorých sa vyskytujú rôzne klinické príznaky súvisiace s intoleranciou potravín. Majú ju používať zdravotní pracovníci so skúsenosťami s používaním diagnostických metód in vitro.

PRINCÍP POSTUPU

AESKUCARE® Food Intolerance je modifikovaný systém ELISA (enzymová imunoabsorpčná analýza). Pomôcka obsahuje 4 rady a v každom rade je 5 testovacích oblastí (okien). V každej testovacej oblasti sú na membránu naviazané jeden štandardný alebo dva špecifické extrakty potravín alebo zmesi potravín. Špecifické protilátky IgG₄ zo vzorky sa viažu na príslušné antigény. Naviazaný ľudský slgG₄ sa deteguje podľa špecifických anti-ludských protilátok IgG₄. Na zosilnenie signálu je pridaná sekundárna protilátka naviazaná na alkalickú fosfatázu. Po pridaní farebného čidla sa naviazaný IgG₄ identifikuje indigovo sfarbeným precipitátom. Hladiny IgG₄ (slgG₄) špecifického pre potraviny možno odčítať semikvantitatívne voľným okom pre všetkých 40 extraktov potravín/zmesí potravín. Tieto hladiny slgG₄ sa klasifikujú na 3 úrovne. Odčítanie sa vykonáva porovnaním sytosti (intenzity) farby signálnych riadkov s riadkom príslušného štandardu v každom testovacom poli.

Bezpečnostné opatrenia: 1. Len na ľudskú diagnostiku in vitro. 2. Pred uskutočnením testu si prečítajte celý obsah tohto návodu na použitie. 3. Nepoužívajte reagencie po uplynutí doby expirácie. 4. V prípade poškodenia obalu dôkladne skontrolujte, či nie je poškodené ochranné vrecko pomôcky. Skontrolujte, či reagencie nie sú poškodené alebo otvorené. Ak máte pochybnosti, testovaciu súpravu nepoužívajte, aby sa zamedzilo nesprávnym výsledkom alebo nesprávnej diagnóze. 5. Reagencie sa neodporúča miešať. 6. Farebná reagencia obsahuje 5-bromo-4-chloro-3-indolylofosfat a nitro-modré tetrazolium chlorid. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Noste vhodné rukavice. Dôležité informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálov (k dispozícii na požiadanie). 7. Všetky komponenty sú určené len na jedno použitie. 8. Pri nedodržaní týchto bezpečnostných opatrení výsledky testov nebudú platné. 9. Koagulovaná krv môže upchať dráhy tekutín.

SKLADOVANIE

Skladujte na tmavom a chladnom mieste s teplotou 2-8 °C. Všetky reagencie sú pripravené na použitie, balené po jednej dávke v skrutkovacích skúmavkách.

EXPIRÁCIA

Dátum expirácie je vytlačený na štítkoch, ktoré sa nachádzajú na obalovej škatuli testu. Dátum expirácie súpravy platí pre všetky komponenty súpravy, aj keď expirácia jednotlivých komponentov je odlišná! Po uplynutí expirácie sa všetky komponenty testu musia zlikvidovať.

REAGENCIE A MATERIÁLY

1. DILUT - Zriedovca vzoriek, 350 µl, 1x (oranžové viečko) **2. WASH - Vymývací roztok**, 1 ml každý, 3x (modré viečko) **3. Ab1G4 - Roztok protilátok 1G4**, 800 µl, 1x (sivé viečko) **4. Ab2 - Roztok protilátok 2**, 800 µl, 1x (žlté viečko) **5. COLR - Farebná reagencia**, 800 µl každá (obsahuje 5-bromo-4-chloro-3'-ndolylofosfat/nitro-modré tetrazolium chlorid), 2x (biele viečko) **6. STOP - Zastavovací roztok**, 1 ml, 1x (zelené viečko). **Zohľadnite:** Všetky reagencie sú pripravené na použitie. Skladujte ich pri teplote 2-8 °C do dátumu expirácie.

Ľudský materiál použitý v komponentoch pomôcky AESKUCARE® Food Intolerance bol testovaný a potvrdený ako negatívny na HIV, hepatitídu B a hepatitídu C. Z bezpečnostných dôvodov sa však so všetkými komponentmi súpravy musí zaobchádzať ako s potenciálne infekčným materiálom.

Dodaný materiál: návod na použitie, hodnotiaci list, promo karta, zariadenie na analýzu AESKUCARE® Food Intolerance, stojan na reagencie obsahujúci 9 ampuliek s farebnými kódováním, vrecko na odber vzorky krvi*
* materiál s certifikátom **CE** - dezinfekčný tampón, 50 µl kapiláru s litiovým heparínom na odber vzorky krvi, tampón, leukoplast
* lanceta: sterilný výrobok s certifikátom **CE** , ktorý slúži ako lanceta na odber krvi
* injekčný striekačku (aplikácia kvapalín)

Ďalší potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou súpravy: jednorazové rukavice, časovač Na vzorky žilovej plnej krvi alebo plazmy: bežné pomôcky na napichnutie žily, skúmavky na odber heparinizovanej krvi, laboratórna pipeta

Zoznam extraktov potravín: pozri hodnotiaci list, ktorý sa nachádza v škatuli


TESTOVANIE VZORKY

V tomto teste možno použiť kapiláru krv z vpichu do prsta, ušného lalôčka alebo päty (v prípade malých detí). Do kapiláry dodanej v súprave odoberte správny objem (50 µl). Ako vzorku možno v tomto teste použiť aj heparinizovanú (so sodným alebo litiovým heparínom) žilovú plnú krv, plazmu alebo sérum. Objem, ktorý sa má pridať k zriedovcu vzoriek, je 50 µl pre plnú krv a 20 µl pre plazmu alebo sérum. V prípade plazmy alebo séra sa na nádväkovanie požadovaného objemu musia použiť laboratórne pipety. Po pridaní k zriedovcu vzoriek sa všetky vzorky môžu uchovávať pri teplote 2-8 °C maximálne 72 hodín. Ak chcete vzorku skladovať, označte testovaciu súpravu štítkom s ID pacienta. **Zohľadnite!** Krv neskladujte v kapilárach.

POSTUP TESTU

Príprava: Všetky reagencie a analyzáčná pomôcka sa musia minimálne 30 minút pred použitím i ohriať na teplotu miestnosti (18-30 °C). 1. Otvorte súpravu a vyberte pomôcky, injekčnú striekačku, stojan na reagencie a vrecko na odber vzorky krvi. Položte ich na rovný povrch. 2. Otvorte a zostavte stojan na reagencie. 3. Pomôckou označte vpsímaním ID pacienta do špecifickej oblasti štítku.

Odobratie vzorky kapilárnej krvi: Otvorte vrecko na odber vzorky krvi a vyberte jeho obsah: alkoholový tampón, bezpečnostnú lancetu, 50 µl kapiláru na odber krvi, gázu a leukoplast. Všetky predmety položte na čistý, rovný povrch. 1. Štipnite do špičky prsta alebo ho pred vykonaním vpichu na chvíľu vložte do ľadovej vody, aby sa optimalizoval tlak krvi. 2. Alkoholovým tampónom vyčistite miesto vpichu (ideálne prst 3 alebo 4, bočný). 3. Odblokujte bezpečnostnú lancetu, ako vidieť na obrázku (krok A), a stiahnite ochranné viečko 4. Bezpečnostnú lancetu umiestnite na stranu prsta, kde idete urobiť vpich (krok B), a pevne stlačte tlačidlo.

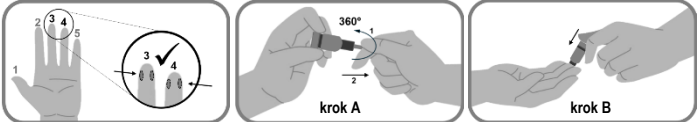

Zohľadnite! Zabezpečte, aby ruka bola pod úrovňou srdca. Ak je tok krvi na začiatku pomalý, prst jemne pomasírujte a skontrolujte, či je ruka pod (!) úrovňou srdca.

Špičkou kapiláry na nechajte natiecť do skúmavky správne množstvo krvi. Zaisťte, aby ste nezakryli (vzduchový) otvor v pieste. Keď sa krv zastaví, znamená to, že objem vzorky (50 µl) je naplnený. Ranu zakryte leukoplastom. Ihneď otvorte ampulku so zriedovacom vzoriek (oranžové viečko) a špičkou kapiláry na odber krvi umiestnite tesne nad otvor ampulky. Prstom zakryte otvor na konci piestu. Jemným stlačením piestu pridajte krv do ampulky so zriedovacom vzoriek. Zatvorte ampulku so zriedovacom vzoriek a ručne alebo pomocou vortexového miešadla ju jemne premiešajte.

Zohľadnite! Neskladujte krv bez toho, aby ste ju pridali do zriedoväča vzoriek. Po pridaní k zriedoväču vzoriek sa všetky vzorky môžu